



Ultraschallreinigung  
nach neuesten Gesetzen.

# Elmasonic Med\*



**Elmasonic Med ist die Serie leistungsstarker Ultraschallreinigungsgeräte, die für zuverlässige Vorreinigung medizinischer, zahnärztlicher und chirurgischer Instrumente und Implantate steht. Mit 37 kHz Ultraschallfrequenz lassen sich auch hartnäckigste Verschmutzungen entfernen.\*\***

**Passend zu den verschiedenen Anwendungen gibt es Elmasonic Med Reinigungsgeräte mit Wannenvolumen von 3 bis 90 Liter (ab Med 60 mit Ablauf). Für beste Reinigungsergebnisse sorgt die von Elma entwickelte, anwendungsspezifische Reinigungschemie und praktisches Zubehör wie Körbe, Trayhalter, uvm.**

**\*\*Elmasonic Med ersetzt grundsätzlich NICHT die Aufbereitung im RDG.**

### Entwickelt für

Arztpraxen • Krankenhäuser • Zahnarztpraxen  
• Zentrale Sterilgutversorgungsabteilungen •  
Dentallabore • Tattoo- und Piercingstudios •  
Fußpflegesalons



### Reinigt

Chirurgische, medizinische oder zahnärztliche  
Instrumente • Prothesen und Implantate •  
Instrumentarium aus den Bereichen Podolo-  
gie, Tattooing und Piercing



### Entfernt

Blut, Gewebe- und Knochenrückstände •  
Fette • Sekrete • Dentinspäne • Zahnstein •  
basale Ablagerungen • Alginate, Gipse •  
Schleif- und Polierpasten • Wachse •  
Flussmittel • Zement • Horn- und Hautreste •  
sonstige Verunreinigungen



## Clean



Elmasonic Med Geräte sind nach MDR-Verordnung (EU) 2017/745 als Medizinprodukt der Klasse I registriert.



Edelstahloberflächen sind leicht zu reinigen, Display und Folientastatur sind abwischbar. Das moderne Design kann sich sehen lassen.

## Intelligent



degas: Schnellentgasung  
eco: Leise, energieeffizient, längere Gerätelebensdauer  
sweep: Gleichmäßigere Ultraschallreinigung  
pulse: Bei hartnäckigsten Verschmutzungen  
dynamic: Automatischer Wechsel zwischen pulse und sweep für noch bessere Reinigungsergebnisse



Vier individuelle Reinigungsprogramme lassen sich im Menü speichern und per Schnellwahl aktivieren – für verlässliche Abläufe und reproduzierbare Reinigungsergebnisse.

## Einfach



Das gut lesbare und übersichtliche Display erlaubt eine einfache und präzise Einstellung der Reinigungsparameter.



Dank Anzeigen und Warnmeldungen, z. B. bei Reinigungsende oder bei Erreichen der Grenztemperatur, wird der Anwender stets über den aktuellen Betriebszustand informiert.


## Sicher



Die Grenztemperatur ist individuell einstellbar. So kann die Denaturierung von Protein verhindert werden. Wertvolles Instrumentarium wird geschützt und perfekt sauber.



Der Kunststoffdeckel sorgt durch reduzierte Betriebsgeräusche für eine leisere Arbeitsumgebung. Nach der Reinigung dient er als praktisches Abtropftablett für Korb und Teile.

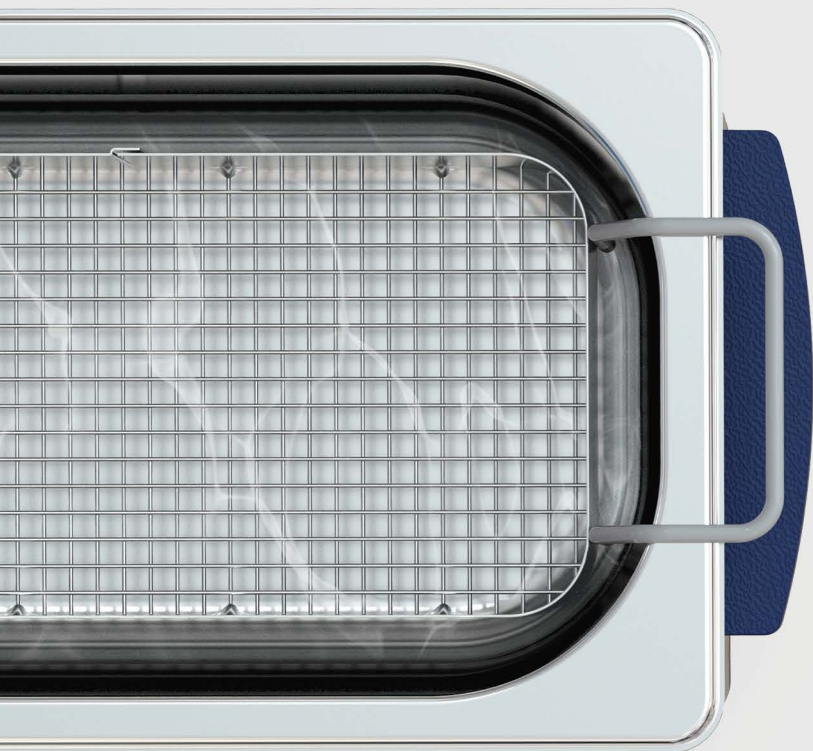

**Elma Schmidbauer GmbH**  
**Gottlieb-Daimler-Str. 17**  
**78224 Singen (Germany)**  
**[www.elma-ultrasonic.com](http://www.elma-ultrasonic.com)**

Technische und optische Änderungen vorbehalten.  
Elmasonic Med\_DE\_01\_20

\*Medizinprodukt Klasse I gemäß Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745. Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze.